


نخستین میکرونایف رادیویی هیبرید

ایگنایت، نخستین دستگاه میکرونایف هیبرید است که، هیبریدی شش گانه است. این سیستم از رادیوفرکانس مونوپلار و بای پلار به طور همزمان در یک پالس استفاده می کند، تا انرژی رادیویی را هم به لایه های سطحی و هم به لایه های عمقی پوست برساند. با ژنراتور رادیوفرکانس پیشرفته ی این دستگاه، در یک فرکانس محدود نخواهید ماند، چرا که توانایی تولید فرکانس های رادیویی از ۲۰۰ کیلو هرتز تا یک مگاهرتز را دارد، که گاه در یک پالس هم تغییر می کنند. پس می توان به هر مراجعه کننده، درمانی اختصاصی بنا به نیازهای خاص او، نوع پوست، یا آناتومی بدن و یا هر گونه آب و هوایی را ارائه داد. از آنجا که رادیوفرکانس های فرکشنال سوزنی توان انتقال مقادیر اندکی از انرژی را دارند، در دستگاه ایگنایت از میکرونایف به جای سوزن استفاده شده است که این کارمیزان انتقال انرژی را به شدت افزایش داده است. در هیبرید ایگنایت، به علاوه از دایود ۶۳۰ نانومتر و کربوکسی کولینگ تراپی و نفوذ لرزشی هم استفاده شده است.

۱. رادیوفرکانس مونوپلار و بای پلار هم زمان
 ۲. فرکانس رادیویی ترکیبی از ۲۰۰ کیلوهرتز تا یک مگاهرتز
 ۳. شش میکرونایف با شکل، عمق نفوذ و کاربرد اختصاصی
 ۴. کربوکسی کولینگ و کربوکسی تراپی همزمان با سرد کردن بافت
 ۵. تابش ال ای دی ۶۳۰ نانومتر کالیبره و پالسی
 ۶. سیستم نفوذ به پوست و همچنین کنترل درد با ویبرو پرکاشن
 که همه ی این ها روی یک هندپیس به نام ایگنایت طراحی و جانیابی شده است که در جای خود، شاهکار مهندسی می باشد.

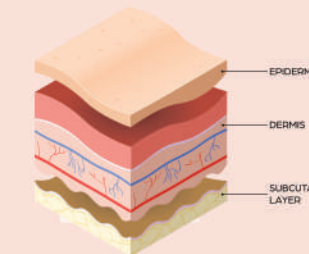

کاربردهای درمانی

- لیفت صورت
- جوانسازی پوست
- لیفت گردن
- لیفت زیر بغل
- جوانسازی بخش داخلی ران
- جوانسازی و لیفت دکلته
- تحریک رشد مو
- جوانسازی دست
- درمان آکنه فعال
- درمان اسکار
- درمان استرچ مارک
- درمان خطوط پیری
- جوانسازی ناحیه ژنییتال

Micro knife

میکرونایف های تخصصی

می گویند برای ارائه ی کار خوب، ابزار خوب لازم است. ما با این اصل بسیار موافقیم، از این روی در ایگنایت، میکرونایف های گوناگون برای کاربران طراحی شده است که هر کدام جداگانه یک پتنت به شمار می روند. میکرونایف ایگنایت در چهار سایز برای صورت و بدن طراحی شده است.

میکرونایف های کوچک

مناسب برای صورت، سطح این تیپ ۱۵ در ۱۵ میلیمتر مربع است که دارای ۴۲ سوزن با عمق نفوذ ۱/۵ تا ۳ میلیمتر می باشد، فاصله ی تیپ ها در دو محور عمود بر هم، دو و چهار میلیمتر است که عمق و اثر نفوذ را افزایش می دهد.




میکرونایف در ۴ سایز مختلف



میکرونایف بزرگ

مناسب برای بدن، و بافت های مقاوم به درمان می باشد. گلایه از چروک های دکلته، شلی و افتادگی پوست شکم و بازو، داخل ران ها و چین های روی زانو ها از شکایت های بسیاری از مراجعین است که درمان های موثر زیادی برای آن وجود ندارد. این میکرونایف به گونه ای طراحی شده است تا کار روی مناطق وسیع را در کمترین زمان انجام دهد. این تیپ نیز دارای ۴۲ سوزن است که از ۳ تا ۳/۵ میلیمتر در پوست نفوذ می کنند و در درمان پوست بدن نتایج خارق العاده ای را رقم می زنند.

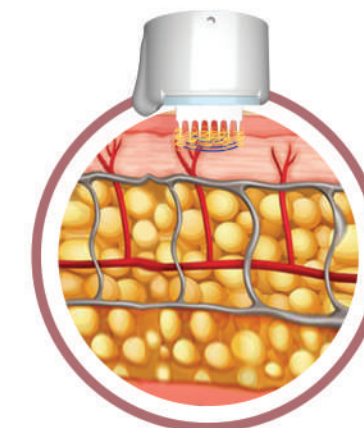

Hook Tip

این میکرونایف ویژه، بسیار متفاوت است به طوری که کاربری آن نیاز به آموزش جداگانه دارد. جهت ورود آن به پوست، عمودی نیست بلکه زاویه دار است و حول محور عمودی نیز حرکت نمی کند. سوزن های آن شبیه قلاب هستند و در هنگام ورود به پوست قفل می شوند تا حداکثر انرژی را درست در عمق دره ی چین ها تمرکز دهند و سبب بالا آمدن چین و لیفت پوست شوند. هرچند کار با این تیپ تخصصی است، اما نتایج بالینی آن بسیار چشمگیر می باشد. میکرونایف هوک در درمان ترک های پوست هم، دست آوردهای چشمگیری دارد.



Acne Tip

نمی شود از پوست حرف زد و با آکنه کاری نداشت. درمان آکنه و جوش صورت خصوصاً آکنه بزرگسالی چیزی است که بیشتر مردان و زنان در یک دوره زندگی خود درگیر آن هستند، داروهای زیادی وجود دارد که متاسفانه تاثیر موقتی داشته و پس از مدتی دوباره آکنه نمایان می شود. دستگاه ایگنایت، یک میکرونایف تخصصی برای آکنه دارد. این تیپ برای درمان آکنه های فعال و نیز اسکار آکنه طراحی شده است، که همراه با سابسیژن هم قابل استفاده می باشد.



Selective

از این سری تخصصی برای ایجاد انرژی به صورت کانونی در نواحی که امکان دسترسی وجود ندارد و یا برای حرکت روی خطوط چهره می توان بهره برد. دقت بالا و تراکم فوق العاده ی انرژی در سری سلکتیو، آن را بسیار ویژه و کار آمد نموده است. ویژگی های منحصر به فرد این سری، آن را به عنوان یک روش ایده آل برای جوانسازی دور چشم، درمان چین و چروک ها، رفلکس تراپی و تریگر تراپی مطرح نموده است.



Tetra

سری تترا، چهار قطبی است و برای لیفت بدون لیپولیز طراحی شده است. در نواحی از بدن که فقط به لیفت نیاز است و لیپولیز مورد نظر نیست، از این سری استفاده می شود. با چهار پلاریته ی کروی، شبکه ی درهم تنیده ای از رادیوفرکانس، در اپیدرم و هیپودرم می سازد.



معرفی کربوکسی کولینگ تراپی

سرد کردن بافت، روشی موثر و ایمن برای کنترل درد و کنترل دمای سطح پوست است. در این دستگاه دو روش برای این مهم طراحی شده است که می‌توان در هنگام خرید یکی را به صورت انتخابی برای سیستم خود انتخاب کنید. گزینه ی اول، هوای فشرده ی سرد، با فشار اتمسفر است که روی بافت جت می شود. درست در بالای میکرونایف، مجاری انتقال هوا، قرار دارند که تحت کنترل سیستم عامل دستگاه کار می کنند و در طول درمان بطور دائم پوست را سرد می کنند. با این کار همراه با کاهش درد، از آسیب سطح پوست هم پیشگیری می نمایند.

راهکار دوم، یک شاهکار مهندسی است که از گاز دی اکسید کربن با فشار ۱۰۰ اتمسفر و دمای ۴۰ درجه زیر صفر استفاده می کند. این سامانه بسیار هوشمند طراحی شده است بطوریکه برای هر پالس دو بار شلیک گاز دارد. (هزار میلی ثانیه پیش از رسیدن رادیوفرکانس به بافت و درست پس از پایان پالس) با این کار، بی دردی کامل را تجربه خواهید کرد و علاوه بر اینکه هیچ سوختگی سطحی نخواهیم داشت، کاهش دمای پوست تحت تاثیر این گاز سرد، اثرات جوانسازی را دو برابر می کند. علاوه بر اینکه کربوکسی تراپی سال هاست که به عنوان یکی از روش‌های کمکی موفق در جوانسازی و روشن کردن پوست استفاده می شود، این روش همچنان سبب ترمیم سریعتر بافت می گردد.


ما این گزینه را به حرفه ای ها پیشنهاد می دهیم، کسانی که فقط بهترین ها را برای مشتریان خود می خواهند.

فوتو بایومادولیشن با دایود ۶۳۰ نانومتر کالبره و پالس

در این هندپیس نور دایود با طول موج ۶۳۰ نانومتر تعبیه شده است که طی هر پالس مقادیر کافی از نور دایود را به پوست وارد می کند. فوتوبایومادولیشن فرایندی است که بر اساس تحقیقات انجام شده در ناسا، رشد سلول ها را سریع ترمی کند که در بهبود زخم ها بسیار کمک کننده است. دایود ایگنایت، همچنین در افزایش کلاژن سازی، که در درمان افتادگی و شلی پوست موثر می باشد، نقش دارد.

سامانه ی خودکار برای تعیین درست مشخصات هر پالس

ثابت شده است که حتی بهترین فرکانس ها برای همه ی انواع پوست یا نقاط آناتومی مناسب نیستند به طوریکه برای هر فرد و هر گونه از مشکل باید از فرکانس و عرض پالس ویژه ای استفاده برد و این دقیقاً روش کار سامانه ی هوشمند ایگنایت است. در هر کدام از میکرونایف ها و برنامه های بالا، این مطلب به درستی رعایت شده است تا فرکانس، عرض پالس و الگوی پالس مناسب را در اختیار پزشک قرار دهد.

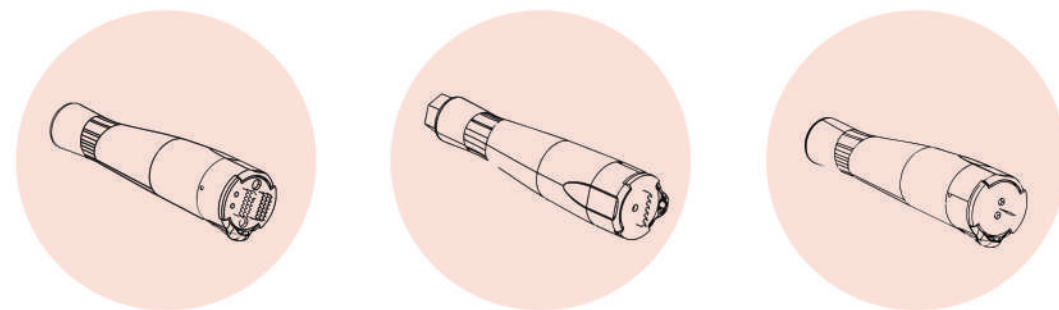

۲۳ سال است با راه اندازی مراکز مختلف درمانی و تحقیق توسعه و تولید تکنولوژی های نوین و کارآمد در کنار شما بوده ایم. با تکیه بر پشتیبانی مراکز دانشگاهی، با گسترش شبکه ی تحقیق، آموزش و خدمات پس از فروش مسئولانه، توانستیم کارنامه ی درخشانی از خود بر جای گذاریم. در این مسیر، با شعار "تأشادی با فناوری" با ایجاد شبکه ای شاد از بیماران، پزشکان و مراکز درمانی تلاش نمودیم با معرفی درمان هایی کم هزینه تر، کم درد تر، کم عارضه تر و با نتایج بالینی ماندگار، خشنودی را در سیمای بیماران و خرسندی را در چهره پزشکان ببینیم.

تهران، خیابان دستگردی (ظفر)

بین نفت و مدرس، پلاک ۲۱۶

☎ 0920 20 75 415

☎ +98 (21) 75 415

🌐 www.medariaco.com

📷 medaria.official



GR-CA-DER-81-11-00

medaria®
simple solutions

ionite

نخستین میکرونایف رادیویی هیبرید



دیباچه

در دو دهه ای که از حضور جدی تکنولوژی در کارزار بشر در برابر پیروی می گذرد در مواردی یک فناوری ادعا کرده است که می تواند این مشکل را به بهترین نحو برطرف نماید. اما تجربه نشان داده است که هرگز نمی توان تنها از یک نوع انرژی یا تکنیک استفاده کرد و انتظار نتیجه مطلوب برای همه را داشت. از این رو امروزه برای بهترین درمان جوانسازی و لیفت پوست از پروتکل های ترکیبی بهره می گیرند. در این روش که چندین جلسه به طول می انجامد، هر بار از یک دستگاه یا فناوری خاص استفاده می شود. دستگاه ایگنایت، برای رسیدن به بیشترین نتایج در کوتاه ترین زمان و پرهیز از پیچیدگی های ناشی از پروتکل های ترکیبی، از هیبرید کردن چند تکنیک و انرژی در یک دستگاه و به کار بردن همزمان آنها در یک پالس استفاده کرده است. ایگنایت، که در کالیفرنیا طراحی و ثبت اختراع شده است، با وجود عمق نفوذ بالا، بدون درد است که به کمک سیستم سرد کننده، تحمل بافت را بالا می برد تا درمانیت کامل، بیشترین انرژی را، به سراسر پوست برساند و درمان را حتی در یک جلسه انجام دهد.

ایگنایت برای هر نوع چین و چروک یا اسکار و عارضه ی پوستی، راهکار و ابزار ویژه ای را ارائه داده، و انرژی و فرکانس ویژه ای را به کار می گیرد. مراقب باشید چرا که با استفاده از این سیستم، دیگر دستگاه ها و روش ها را به فراموشی خواهید سپرد.

تکنولوژی

سامانه ی ورود لرزشی (VPP Vibropercussion Penetration)

از آنجا که هر ناحیه از پوست نیاز به عمق و قدرت خاصی دارد، که پزشک در هنگام درمان، با معاینه و بررسی پوست، آن را خواهد دانست، هر دو را با هم فراهم کند. عمق ورود میکرونایف، آن است که سادگی و آرازی عمل، هر دو را با هم فراهم کند. ایگنایت مجهز به فناوری VPP است که همچون یک موتور لرزشی چکشی عمل می کند. این کار، ورود میکرونایف را، آسان و بدون نیاز به فشار می کند. اما کار مهم تر آن، اختلال در پایانه های حسی درد است، به طوری که سبب کاهش احساس درد بیمار می شود. این تکنیک به ویژه در درمان آکنه، چروک های عمیق و ترک های پوست بسیار کمک کننده است، چرا که در این موارد باید از میکرونایف ویژه با عمق نفوذ زیاد استفاده نمود.

