

SlimFIT

شاهکار تکنولوژی برای رسیدن به کمال

دارای مجوز و تایید بالینی از اداره ی کل تجهیزات پزشکی
وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی



تهران، خیابان ظفر، بین نفت و مدرس، پلاک ۲۱۶

تلفن: ۰۲۱-۷۵۴۱۵ / ۰۹۲۰۲۰۷۵۴۱۵


www.medariaco.com info@medariaco.com [medaria.official](https://www.instagram.com/medaria.official) [@medariaco](https://www.facebook.com/medariaco)

اسلیم فیت یک باشگاه حرفه ای و یک کلینیک تخصصی است.

پاسخ به این پرسش در هر فرد بسیار ویژه است.
چرا من از تناسب اندام بی بهره ام؟

رفتارهای ورزشی و عادت های حرکتی ، رژیم غذایی و چگونه خوردن، چاقی و ناهنجاری هورمونی، زمینه های فامیلی و اقلیمی، همگی از جمله فاکتورهای اثرگذار در فرم بدن و ناخشنودی از تناسب اندام می باشد.

همه ی این فاکتورها از طریق تغییرات در پوست ، چربی ، سلولیت و ماهیچه ها، نازیبایی اندام را رقم می زنند و اسلیم فیت برای هرکدام از آنها برنامه ای تخصصی دارد. پس با برنامه های کامل این تکنولوژی پیشرفته، توانایی درمان پوست و چربی و همزمان ماهیچه ها را خواهیم داشت، گویا یک باشگاه حرفه ای در یک کلینیک تخصصی هستیم.

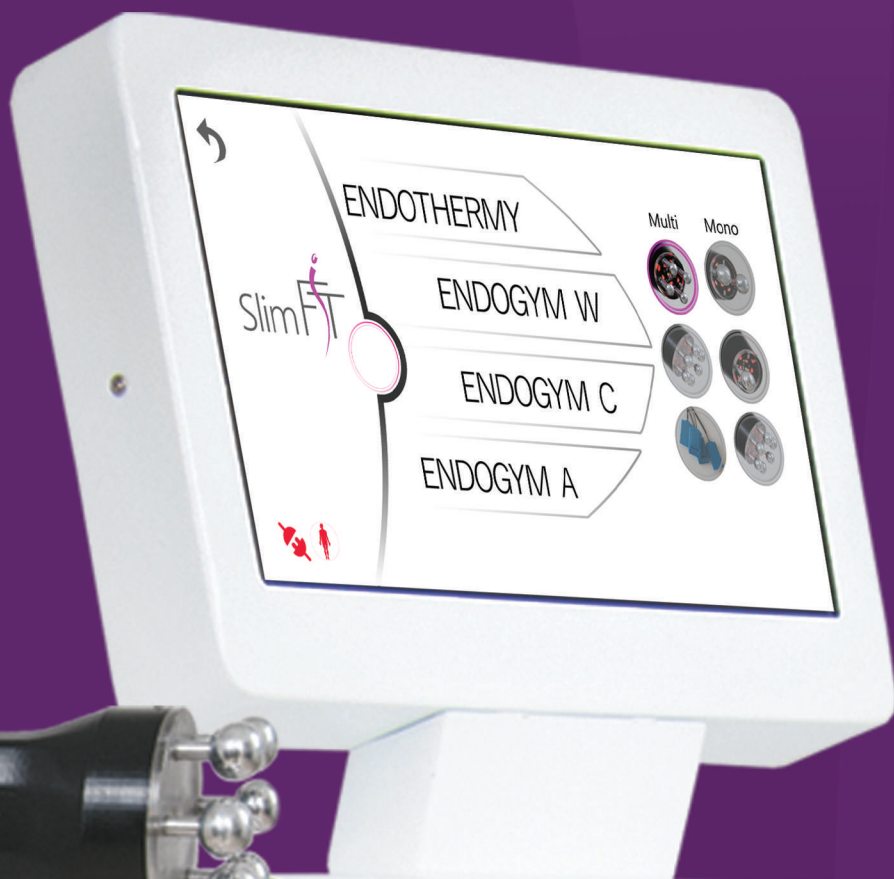


medaria®
simple solutions

اسلیم فیت، یکی برای همه

این روزها گزینش کیس درخور هر تکنولوژی گام نخست درمان است و البته دردسری بزرگ چرا که نپذیرفتن کسی که آمده تا پیش شما درمان شود گونه ای از هدر رفت سرمایه و شکست استراتژی است. جز اندک کسانی که بسیار چاق هستند، اسلیم فیت بهترین تکنولوژی برای همه ی گزینه ها است. چراکه اسلیم فیت داشتن اندامی زیبا را گارانتی میکند.

برنامه ریزی شده برای تضمین موفقیت

نرم افزار اسلیم فیت از یک الگوی درمانی پیشرفته بهره می گیرد که در هیچکدام از دستگاه های دیگر در دسترس نیست. در این روش آنالیز پزشک مهمترین بخش درمان است که برپایه ی الگوی پیشنهادی اسلیم فیت انجام می شود. پس از آن نرم افزار چهار مدل اصلی انرژی دینامیک CRF و شش سامانه ی درمانی آناتومیک را پیشنهاد می کند. این الگوی نوین، نتیجه های بالینی چشم گیری را پدید می آورد که پیش از این رویا به شمار می آمدند ولی اکنون اسلیم فیت موفقیت درمان را تضمین می کند.

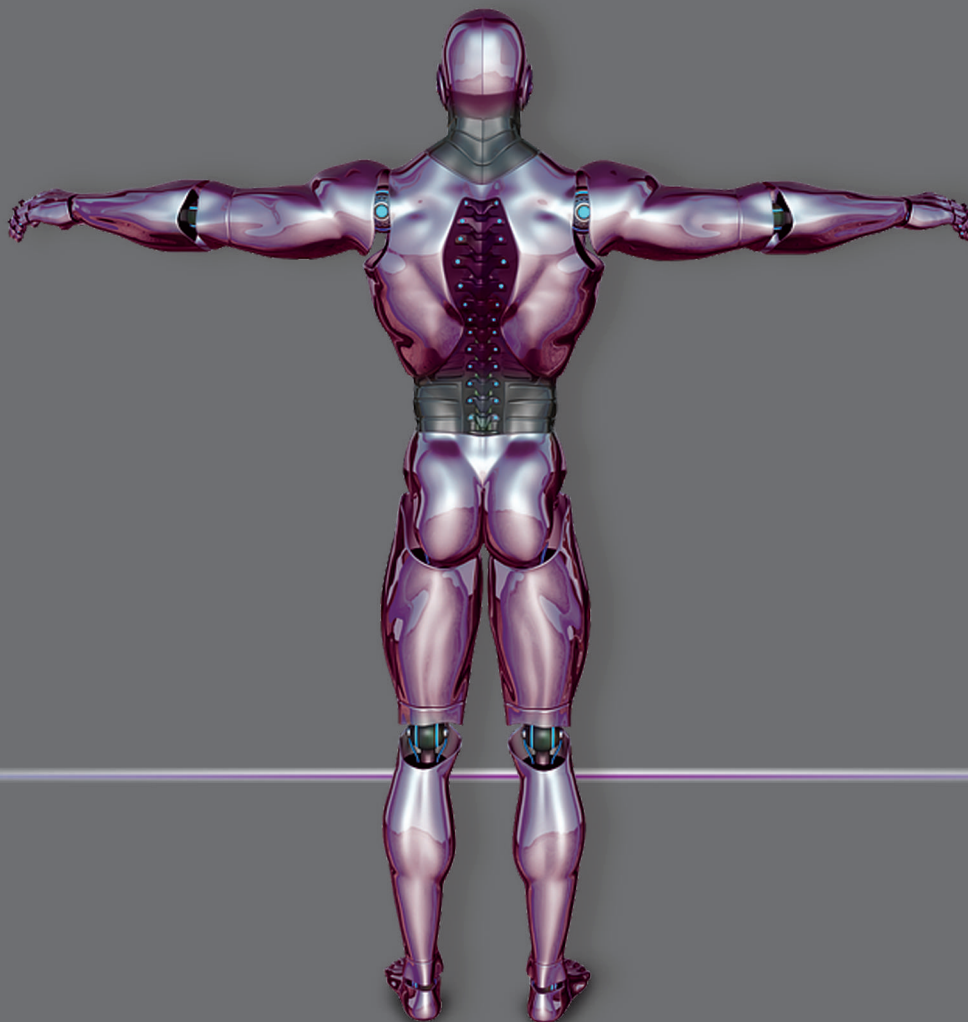

شعله رادیویی سرد

تکنولوژی Cool Radio Jet

جت رادیویی سرد: دستگاه SlimFit دارای هندپیس ارگونومیکی است که می توان سری های چندگانه SlimFit را به آن وصل نمود و از ویژگی های تخصصی هر یک از آنها بهره مند گشت. این سری ها Cool Radio Jet یا به اختصار CRJ نام دارند. CRJ Head ها چهار مدل (ماژول) دارند.

Cool Jet

هر CRJ مجهز به سیستم خنک کننده ی CoolJet است. CoolJet هوای فشرده سرد را درست به محل اثر رادیویی می افشاند و این باعث سرد شدن منطقه ی مورد درمان شده و دستاوردهای زیر را به همراه دارد:

۱. درمان با انرژی بالاتر را ممکن می کند.
 ۲. درمان را بسیار راحت و بدون درد می کند.
 ۳. اثرات عمقی را افزایش می دهد.
 ۴. امکان سوختگی و آسیب های سطحی احتمالی را بسیار کاهش می دهد.
- از این رو، سری های SlimFit به CRJ به معنای **شعله رادیویی سرد** نام گذاری شده است.





Selective CRJ: از این سری تخصصی برای ایجاد انرژی به صورت کانونی و در نواحی که دسترسی سختی وجود دارد و یا برای حرکت روی خطوط چهره می توان بهره برد. دقت بالا و تراکم فوق العاده ی انرژی در سری سلکتیو، آن را بسیار ویژه و کار آمد نموده است.



Mono CRJ: این سری مونوپلار برای کانونی کردن امواج رادیویی در یک منطقه به کار گرفته می شود می تواند هم لیفت و هم لیپولیز را انجام دهد و هم رادیوفرکانس گرمایشی و کششی تابش کند.

سری مونوپلار با طراحی جدید دوگانه، یکنواختی و هموژن بودن گرمایش و کشش را در هر دو نوع رادیوفرکانسی بهینه سازی می کند.



Tetra CRJ: سری تترا، چهار قطبی است و برای لیفت بدون لیپولیز طراحی شده است. در مکان های آناتومی که فقط به لیفت نیاز است و لیپولیز اصلا مورد نظر نیست، از این سری استفاده می شود.



Hexa CRJ: سری هگزا سری جدید با توانایی لیفت بالا در مناطق گسترده و لیپولیز چربی های سطحی است. با انتخاب این هندپیس از سری هندپیس های Mono اثرات رادیوفرکانسی عمیق تر و لیپولیز اثربخش را شاهد خواهید بود؛ در حالی که انتخاب این هندپیس از سری هندپیس های Multi اثرات لیفتینگ و سطحی رادیوفرکانس را بدست خواهید آورد.




فناوری Free Fitness با ماژول Radio GYM

این فناوری یک گام بزرگ برای افزایش دقت و وسعت درمان است. Free fitness اپراتور نمی خواهد و هزینه ها را کاهش می دهد.

در این روش پلیت های درمانی روی ماهیچه ها و بافت مورد درمان بر پایه ی الگوهای ویژه ای چسبانده می شوند و انرژی رادیویی گرمایشی و کششی را هم زمان به ژرفای بافت می فرستند .

ماژول رادیو جیم هندزفری است و می تواند همزمان دو اندام گوناگون را درمان کند، برای نمونه دو بازو یا دو ران پای راست و چپ را در یک جلسه انجام دهد.

افزایش بهره وری و کاهش شمار جلسه های درمانی از دستاوردهای برجسته ی این تکنیک جدید است.

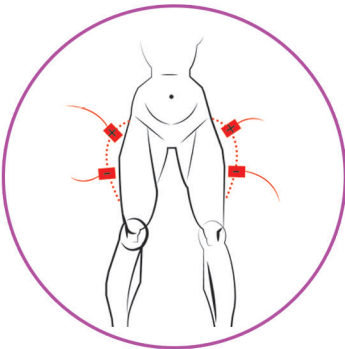

رنگ درمانی (کروماتراپی)

هر سری CRJ ماژولی است که هم چنین مجهز به یک پنل نوری از LED های پرتوان با رنگ قرمز و طول موج ۶۳۰ نانومتر می باشد که اثرات درمانی را افزایش می دهد و اجرای کار SlimFit را برای بیمار پسندیده تر و خوشایندتر می نماید. نور قرمز، SlimFit را تبدیل به یک دستگاه مجهز به رنگ درمانی یا کروماتراپی کرده است.

Chromothrapy دانش رو به رشد و نویی است و امروزه در امریکا و اروپا مشتاقان فراوانی دارد. گفتنی است اثرات بالینی پرتو درمانی پنل LED در دستگاه SlimFit در حال بررسی بالینی می باشد.

